


# Hygieniamaski



Kevyt, helppokäyttöinen, mukava hygieniamaski. Täyttää lääketieteellinen suojain luokka 1 direktiivi 93/42/EEC liite VII vaatimukset.

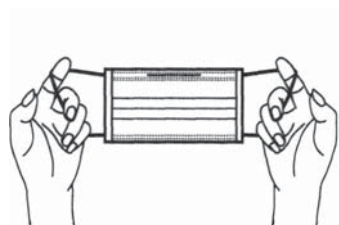

Levitä maski niin, että nenäpuristin on yläpuolella (Leveämpi vaalea reuna)



Aseta maski kasvoille sininen puoli ulospäin, peitä nenä ja leuka, vedä nauhat korvien taakse.



Muotoile nenäliuska tarkasti kasvoja vasten.

TüV SÜD testiraportti 721654269, 7.5.2020. Hyväksytyt tulokset bakteerisuodatus-, paineero-, verenläpäisy- ja mikrobipuhtaustesteistä.

Summary of Test Results

No.	Test Item	Test Standard	Test Standard Type II R	Judgement
1	Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE), %	EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex B	≥ 98	Pass
2	Differential Pressure Test (Pa/cm <sup>2</sup> )	EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex C	< 60	Pass
3	Synthetic Blood Penetration Test (kPa)	ISO 22609:2004	≥ 16.0	Pass
4	Microbial Cleanliness Test (CFU/g)	EN 14683:2019+AC:2019(E) Annex D	≤ 30	Pass

Results

No.	Test Item	Test Result
1	Bacterial Filtration Efficiency (BFE) Test	Specimen 1#: 99.9% Specimen 2#: 99.9% Specimen 3#: 99.9% Specimen 4#: 99.8% Specimen 5#: 99.9%
2	Differential Pressure Test	27.7 Pa/cm <sup>2</sup>
3	Synthetic Blood Penetration Test	Specimen 1#-32#: None seen
4	Microbial Cleanliness Test	Specimen 1#: 1 CFU/g Specimen 2#: 2 CFU/g Specimen 3#: 2 CFU/g Specimen 4#: 1 CFU/g Specimen 5#: 2 CFU/g



VP-SERVICE OY

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
www.vp-service.fi

Työkalut ja tarvikkeet

**Tilausno: 0143-1**  
**Pakkaus: 50 kpl/rasia.**

**Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**